

# wellion<sup>®</sup> **MICRO-PUMP**

**INSULINPUMPEN-SYSTEM**




**KLEIN - LEICHT - DISKRET**

# wellion<sup>®</sup> **MICRO-PUMP**

**INSULINPUMPEN-SYSTEM**

## *Ich gestalte mein Leben*

Sie entscheiden, wo Sie Ihre Pumpe tragen möchten!

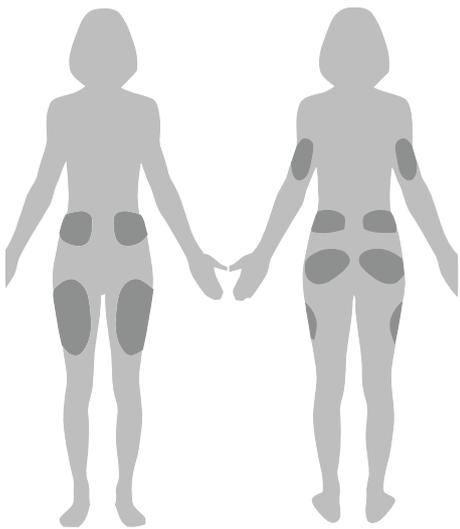

Vorderseite

Rückseite

Die **schlauchlose** Wellion MICRO-PUMP kann an vielen verschiedenen Körperstellen, passend zu Ihrem Tagesplan oder Outfit, getragen werden (z.B. Bauch, Oberarm, Oberschenkel, unterer Rücken, ...).

## **ALLES IM BLICK**

Mit dem **drahtlosen Portablen Diabetes Assistent (PDA)** lässt sich Diabetes perfekt steuern. Er hilft Ihnen dabei, Ihren Insulinbedarf zu decken und erfasst gleichzeitig wichtige Daten, die Ihren Diabetes betreffen.


Mit dem **integrierten Blutzuckermessgerät** können Sie jederzeit Ihren Blutzuckerspiegel bestimmen und der integrierte Bolusrechner berechnet eine vorgeschlagene Bolusmenge.



Ihre ÖSTERREICHISCHE Gesundheitsmarke

## DISKRET INSULIN VERABREICHEN

Durch das **kleine und flache Design** und die passende Körperstelle kann die Insulinpumpe auch ganz diskret getragen werden.

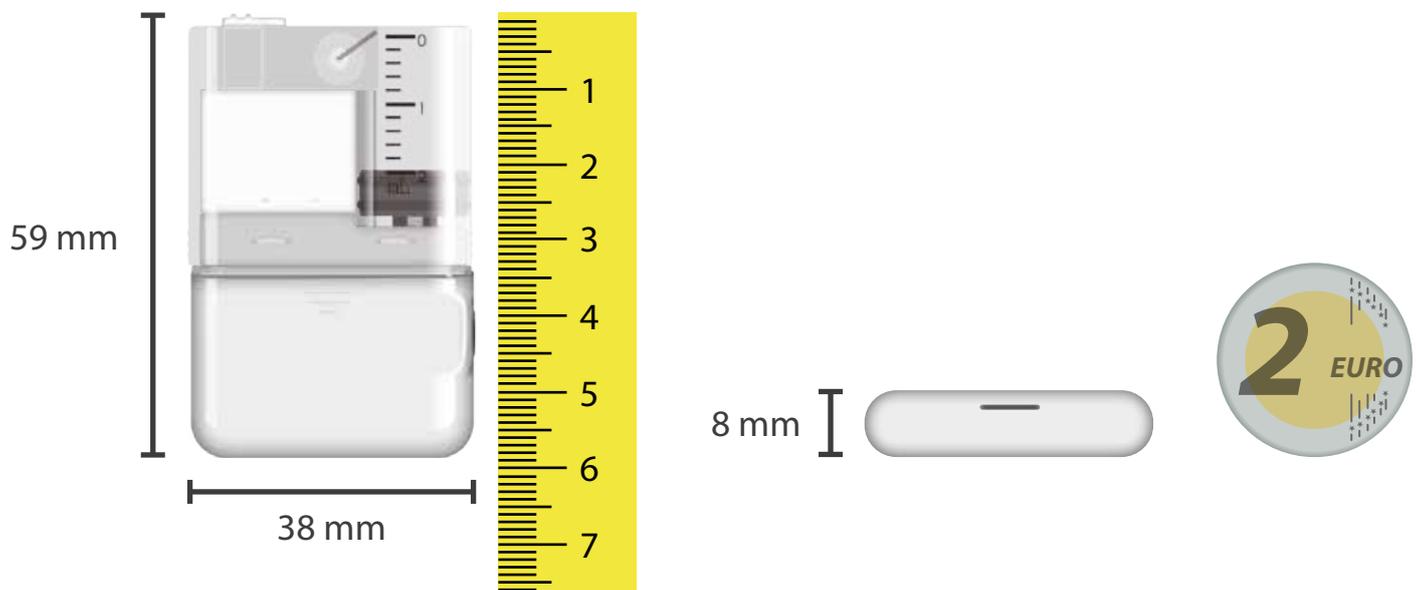

Diskrete Insulinabgabe mit der **Schnellbolus-Taste** direkt an der Pumpe.  
Schrittgröße pro Tastendruck: 0,1-2U



← Schnellbolus-Taste

# wellion<sup>®</sup> **MICRO-PUMP**

**INSULINPUMPEN-SYSTEM**

## **INNOVATIVE DIABETES-STEUERUNG**

Wellion MICRO-PUMP - das Beste von Patch-Pump und traditioneller Insulinpumpe.

Der PDA besticht durch seine **intuitive Menüführung** und ermöglicht ein ausführliches **Datenmanagement** durch die maßgeschneiderte App.




## **RESSOURCEN-SCHONEND UND GENAU**

Durch den **wiederaufladbaren Akku** der Wellion MICRO-PUMP muss lediglich das Infusionsset spätestens alle 72 Stunden ausgetauscht werden. Die Pumpe selbst kann bis zu 4 Jahre verwendet werden.

Die neueste Technologie der Wellion MICRO-PUMP ermöglicht eine präzise Insulindosierung beginnend bei 0,025 U.

## BLUTZUCKERMESSGERÄT IMMER DABEI

Das **Wellion® MICRO-PUMP** System besteht aus zwei Teilen:  
schlauchlose Pumpe und Portabler Diabetes Assistent (PDA)

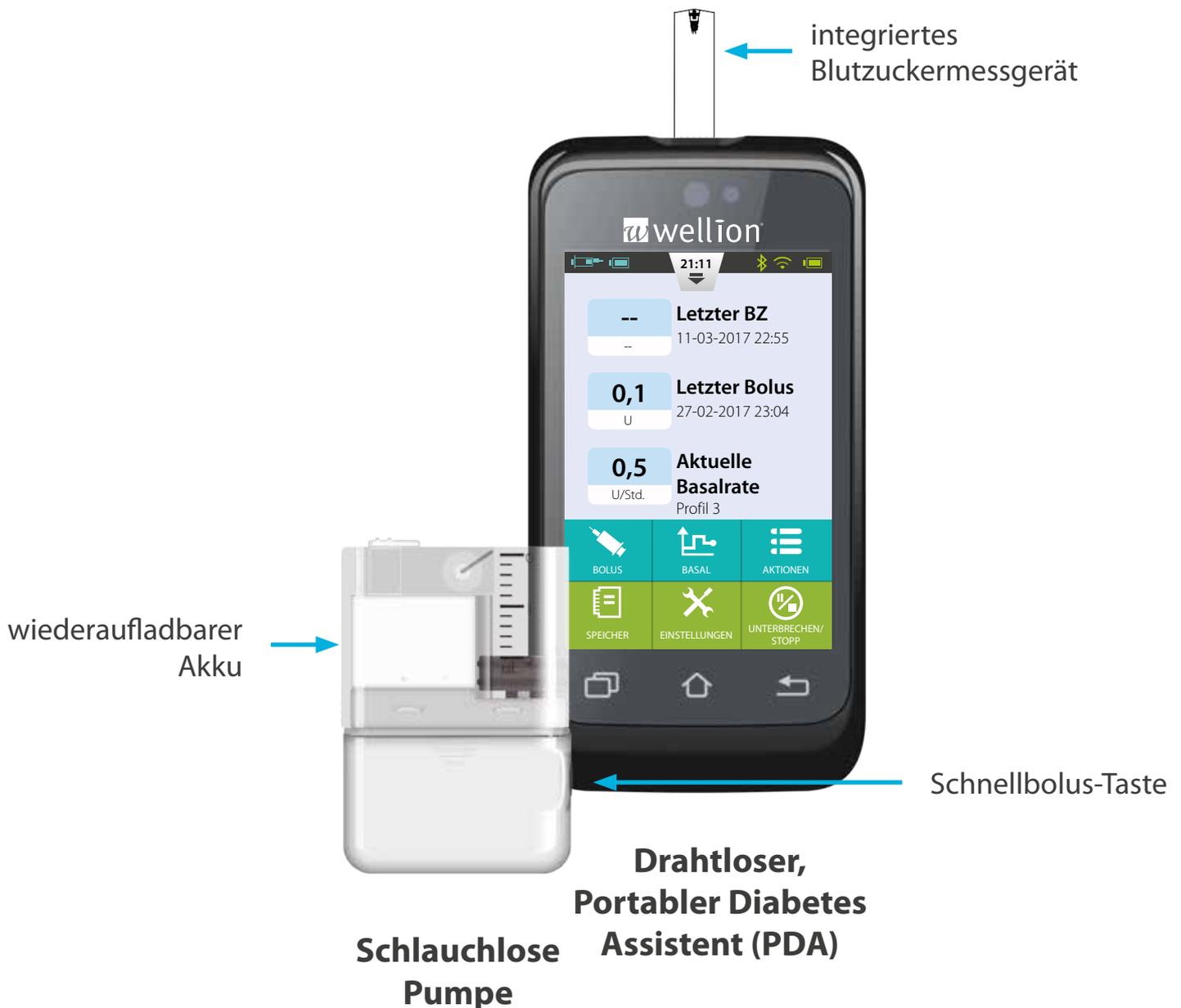

# wellion<sup>®</sup>

## MICRO-PUMP

INSULINPUMPEN-SYSTEM

### VORTEILE AUF EINEN BLICK

Bolusschritte:	0.025 / 0.05 / 0.5 / 0.1 / 1U
Maximaler Bolus:	35U
Verzögerter Bolus:	% oder U
Basal:	7 Basalprogramme bis zu 48 unterschiedliche Basalraten / Tag
Maximale Basalrate:	35 U/h
Temporäre Basalrate:	% oder U
Bolusrechner:	Aktives Insulin
	48 Bereiche für Zielblutglukosewert
	48 Bereiche für das Verhältnis Insulin:Kohlenhydrate 48 Bereiche für Korrekturfaktor
Alarmbenachrichtigungen:	Ton, Licht, Vibration
Blutzuckerteststreifen:	Wellion MICRO Teststreifen
Probenmenge:	0,5 µL
Messdauer:	5 Sekunden



PDA



MICRO-PUMP



Reservoir



Pumpen-Basis

Kanüle

Ihre ÖSTERREICHISCHE Gesundheitsmarke

## EINFACH STARTEN



1. Reservoir  
befüllen



2. Infusionsset  
anbringen



3. Pumpe befestigen



4. Steuerung mittels  
PDA

***Sie können ihr Leben individuell gestalten:***

bei der Bewegung, beim Schlafen, beim Spielen oder beim Sport



# wellion®

## MICRO-PUMP

### INSULINPUMPEN-SYSTEM



Ihre  
ÖSTERREICHISCHE  
Gesundheitsmarke

## DIE VORTEILE VON PATCH-PUMP UND TRADITIONELLER INSULINPUMPE



Diskret



72-stündige Insulinabgabe



Schlauchlos



Hoher Tragekomfort



Datenmanagement



Flexible Lebensweise



Benutzerfreundlicher PDA



Sicher und zuverlässig



Weniger Injektionen

Service und Vertrieb:



**MED TRUST GmbH**

Bergener Ring 17-19

01458 Ottendorf - Okrilla

[www.medtrust.de](http://www.medtrust.de); [www.wellion.eu](http://www.wellion.eu)

Tel.: 035205 / 469 - 10

Fax: 035205 / 469 - 19

E-Mail: [office@medtrust.de](mailto:office@medtrust.de)